

独 家 设 计

盖 垫 一 体



//// 产品特点

- USP Class VI标准聚丙烯原料，10万级洁净车间生产
- 多种规格可选，1.5ml和0.5ml两种容量，包括二维码冻存管、三码合一冻存管、无码普通冻存管；袋装和盒装两种包装形式
- 配合常规100孔冻存盒，满足大部分实验室用户的使用需求
- 无DNA/RNA酶，无人类DNA
- 无热原，无内毒素，无细胞毒性
- 辐照灭菌，SAL 10^{-6}



延长保存时间



提高保存质量



降低炸管风险

警告

请严格按照实验室样本保存方法进行操作，不要将冻存管直接保存在液氮罐的液相氮气中，建议保存在液氮上方的气相液氮里。如使用不正确的保存方法，在解冻过程中，残留在冻存管中的液氮会由于升温而剧烈汽化，可能会导致冻存管发生炸裂，产生人身危害，甚至引发实验室安全问题。

//// 产品细节对比



SORFA盖垫一体设计



二次注塑 盖垫一体

Vs

普通冻存管盖设计

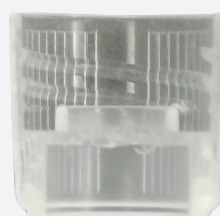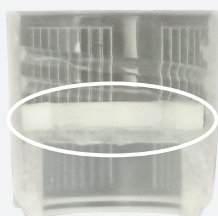


垫圈可拆卸

//// 产品优势

- 盖内垫圈采用二次注塑工艺
- 一体成型，杜绝变形和脱落
- 极大降低液氮进入冻存管的几率
- 降低解冻过程中的炸管风险

进液氮风险

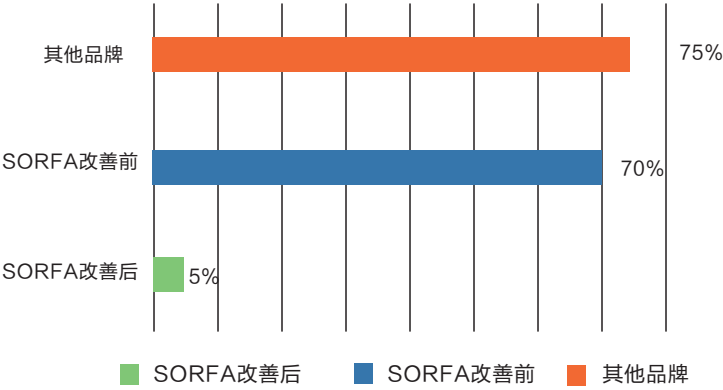

//// 产品信息

袋装冻存管

目录号	容量(ml)	颜色	灭菌	包装	二维码	支/包	包/盒	盒/箱	装箱数量
143140	0.5	橙色	+	袋装	无二维码	50	10	4	2000
143340	1.5	橙色	+	袋装	无二维码	50	10	4	2000
141140	0.5	橙色	+	袋装	预制二维码	50	10	4	2000
141340	1.5	橙色	+	袋装	预制二维码	50	10	4	2000
145340	1.5	橙色	+	袋装	三码合一	50	10	4	2000

盒装冻存管

目录号	容量(ml)	颜色	灭菌	包装	二维码	支/盒	盒/中盒	中盒/箱	装箱数量
142140	0.5	橙色	+	盒装	无二维码	100	8	4	3200
142340	1.5	橙色	+	盒装	无二维码	100	6	4	2400
140140	0.5	橙色	+	盒装	预制二维码	100	8	4	3200
140340	1.5	橙色	+	盒装	预制二维码	100	6	4	2400
144340	1.5	橙色	+	盒装	三码合一	100	6	4	2400

配套冻存管盒/读码仪

目录号	容量(ml)	品名	盒/中盒	盒/箱	装箱数量
151030	0.5	100孔2D冻存管盒, PC, 蓝色	8	4中盒	32
151035	1.5	100孔2D冻存管盒, PC, 蓝色	6	4中盒	24
163110	/	高速2D冻存管读码仪, 100孔型	/	/	1台/箱



北京中生柏奥生物科技有限公司

地址：北京市海淀区后屯南路26号
电话：01060606805

网址：www.ebaiao.com
邮箱：info@ebaiao.com

